


ESL - 24

AUTOMOBILINIS MASAŽUOKLIS

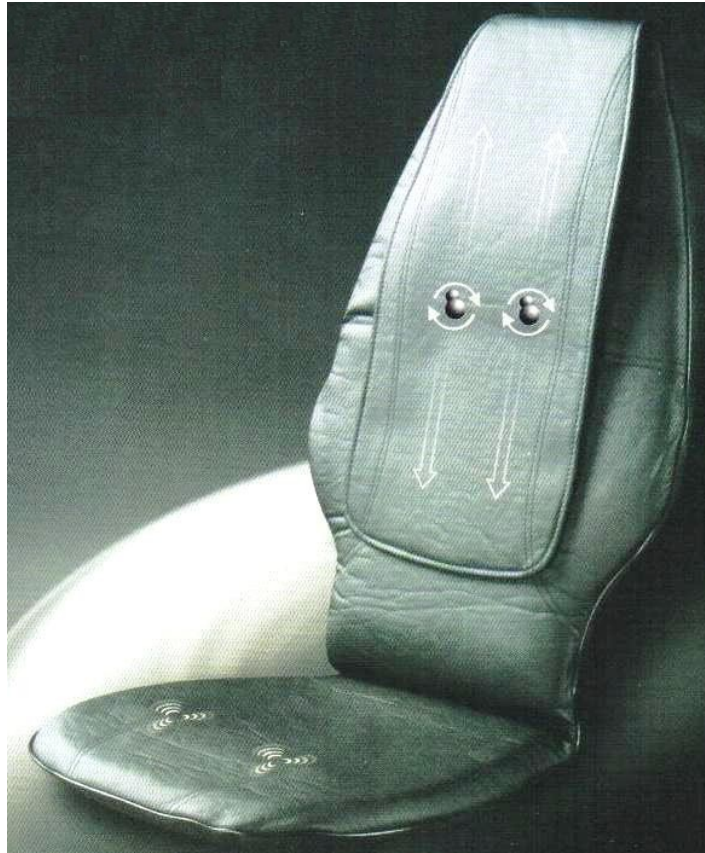

Naudojimo instrukcija

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

- Masažuoklis skirtas tik asmeniniam naudojimui;
- Masažuokliu naudokitės griežtai pagal instrukciją;
- Naudokite tik prie masažuoklio esančius originalius priedus;
- Atkreipkite dėmesį ar jūsų namuose bei automobilyje esanti elektros srovė atitinka nurodytą masažuoklio techninėje charakteristikoje;
- Nejunkite masažuoklio į elektros tinklą, jei rankos šlapios;
- Masažuokliu nesinaudokite, jei jis buvo įkritęs į vandenį ar nukritęs ant grindų. Saugumo užtikrinimui, masažuoklį pirmiausia parodykite specialistui;
- Nenaudokite masažuoklio drėgnose patalpose arba lauke;
- Nenaudokite masažuoklio aukštos temperatūros patalpose, kaip sauna, pirtis ar vonios kambarys;
- Nenaudokite masažuoklio patalpose, kur staigūs temperatūros svyravimai;
- Nenaudokite masažuoklio patalpose, kur daug dulkių arba ore yra agresyvių cheminių medžiagų;
- Neleiskite, kad pašaliniai nereikalingi daiktai patektų į masažuoklio vidų;
- Nekiškite pirštų tarp masažuoklio galvutėlių, kai masažuoklis veikia;

- Nenaudokite masažuoklio esant pažeistam kištukui, laidui arba praplyšus išorinei dangai.. Atsiradus gedimui, masažuoklį tuojau pat išjunkite, jokių būdų netaisykite patys;
- Masažuoklio išorinę dangą valykite tuomet, kai masažuoklis išjungtas iš elektros tinklo.
- Nepalikite įjungto masažuoklio be priežiūros;
- Ypatingai atsargiai su masažuokliu patariama elgtis, jei šalia yra vaikų, ligonių ar neįgalių asmenų;
- Neleiskite asmenims, negalintiems savarankiškai naudotis masažuokliu, masažuotis be priežiūros;
- Nėštumo bei mėnesinių metu patariama masažuokliu nesinaudoti;
- Asmenims, turintiems dirbtinį širdies vožtuvą, dirbtinus sanarius ar elektroninius implantatus, nepatartina naudotis masažuokliu;
- Masažuokliu nesinaudokite, jei turite kraujotakos sutrikimų, karščiujate, esate smarkiai suprakaitavę arba sušlapę, turite odos infekcinių ligų, traukia mėšlungis, esant atviroms žaizdoms ar sumušimams, odos įtrūkimams, venų uždegimui;
- Masažuokliu nesinaudokite, jei esate išgėrę alkoholio ar blogai jaučiatės;
- Nesinaudokite masažuoklio intensyviu režimu ilgiau nei rekomenduojamas darbinis laikas, kad išvengtumėte traumų.

PRIETAISO SPECIFIKACIJA

PAVADINIMAS: automobilinis masažuoklis ESL-24.


GALIMI MAITINIMO ŠALTINIAI:

- Bendras elektros tinklas (srovės įtampa 230 – 220V);
- Pakraunami akumuliatoriai, standartinė 12V jungtis („pypkė“) automobilio salone, jungiama per specialiai tam skirtą adaptorį ;
- Energijos sanaudos iki 25W.

REKOMENDUOJAMAS DARBINIS LAIKAS : 15 min.

PRIEDAI: AC adaptorius pajungimui prie bendro elektros tinklo, standartinė 12V automobilinė jungtis (per „pypkę“), valdymo pultas.

Valdymo pultas bei jo mygtukų funkcijos

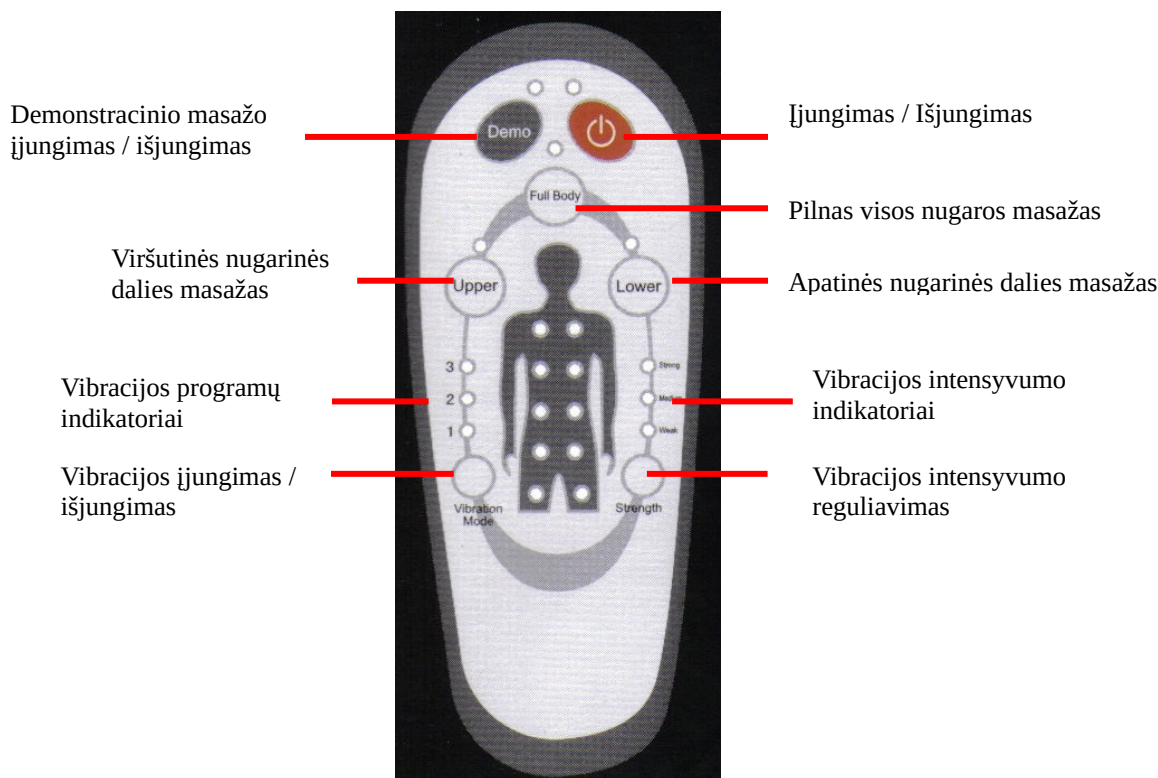

ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS

1. Prijunkite masažuoklį prie elektros tinklo ir paspauskite raudoną įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsijungs ir pradės mirksėti šalia esanti raudona indikatoriaus lemputė. Tai reiškia, kad masažo galvutės nėra tinkamoje vietoje. Palaukite, kol masažo galvutės atsistos į reikiamą vietą ir indikatoriaus lemputė nustos mirksėti, tik po to galite spausti norimos pasirinktos programos mygtukus.
2. Demonstracinės programos režimas (mygtukas **DEMO**) įjungiamas, tik kai masažuoklis prijungtas prie bendro elektros tinklo. Paspaudus DEMO mygtuką, trumpai bus pademonstruota visų galimų masažų funkcijų bei skirtingos masažų intensyvumo programos. Pasibaigus šiai programai, masažuoklis išsijungs automatiškai.
3. Paspaudus mygtuką su užrašu **VIBRATION MODE**, įjungsite vibracinio masažo programą. Spaudinėjant šį mygtuką, užsidegs vienas iš programos indikatorių (1, 2 arba 3) bei įsijungs pasirinkta vibracinio masažo programa. Po trečio paspaudimo programa išsijungs.
4. Spaudinėdami mygtuką **STRENGTH** galėsite reguliuoti vibracijos intensyvumą. Paspaudus mygtuką ir užsidegus virš jo esančiam indikatoriumi **WEAK**, įsijungs silpnas bei švelnus vibracinis masažas. Nuspaudus tą patį mygtuką dar kartą ir užsidegus indikatoriumi **MEDIUM**, įsijungs vidutinio intensyvumo vibracinio masažo programa. Pakartotinai nuspaudus mygtuką, užsidegs indikatorius **STRONG** ir pradės veikti stipraus bei intensyviausio vibracinio masažo programa.
5. Nuspaudus mygtuką **FULL BODY**, užsidegs virš jo esantis indikatorius ir pradės veikti mechaninis visos nugarinės dalies masažo programa. Masažuoklio galvutės judės aukštyn ir žemyn per visą nugarą.
6. Paspaudus mygtuką su užrašu **UPPER**, užsidegs virš jo esantis indikatorius ir pradės veikti viršutinės nugarinės dalies masažo programa. Mechaninio masažuoklio galvutės judės aukštyn bei žemyn viršutinėje nugaros dalyje virš juosmens.
7. Paspaudus mygtuką su užrašu **LOWER**, užsidegs virš jo esantis indikatorius ir pradės veikti apatinės nugarinės dalies masažo programa. Mechaninio masažuoklio galvutės judės aukštyn bei žemyn apatinėje nugaros dalyje žemiau juosmens.
8. Pakartotinai paspaudus raudoną įjungimo / išjungimo mygtuką, išjungsite masažuoklį.

DĖMESIO!

Mygtukas **STRENGTH** veikia, tik prieš tai įjungus vibracinio masažo programą.